



Propojení eZpravy s programem MEDICUS a základní nastavení

1. V programu MEDICUS klikněte v hlavním menu na *Laboratoř/Nastavení: Import laboratorních vyšetření/Rozšířené* - vyberte *Formát MZČR*

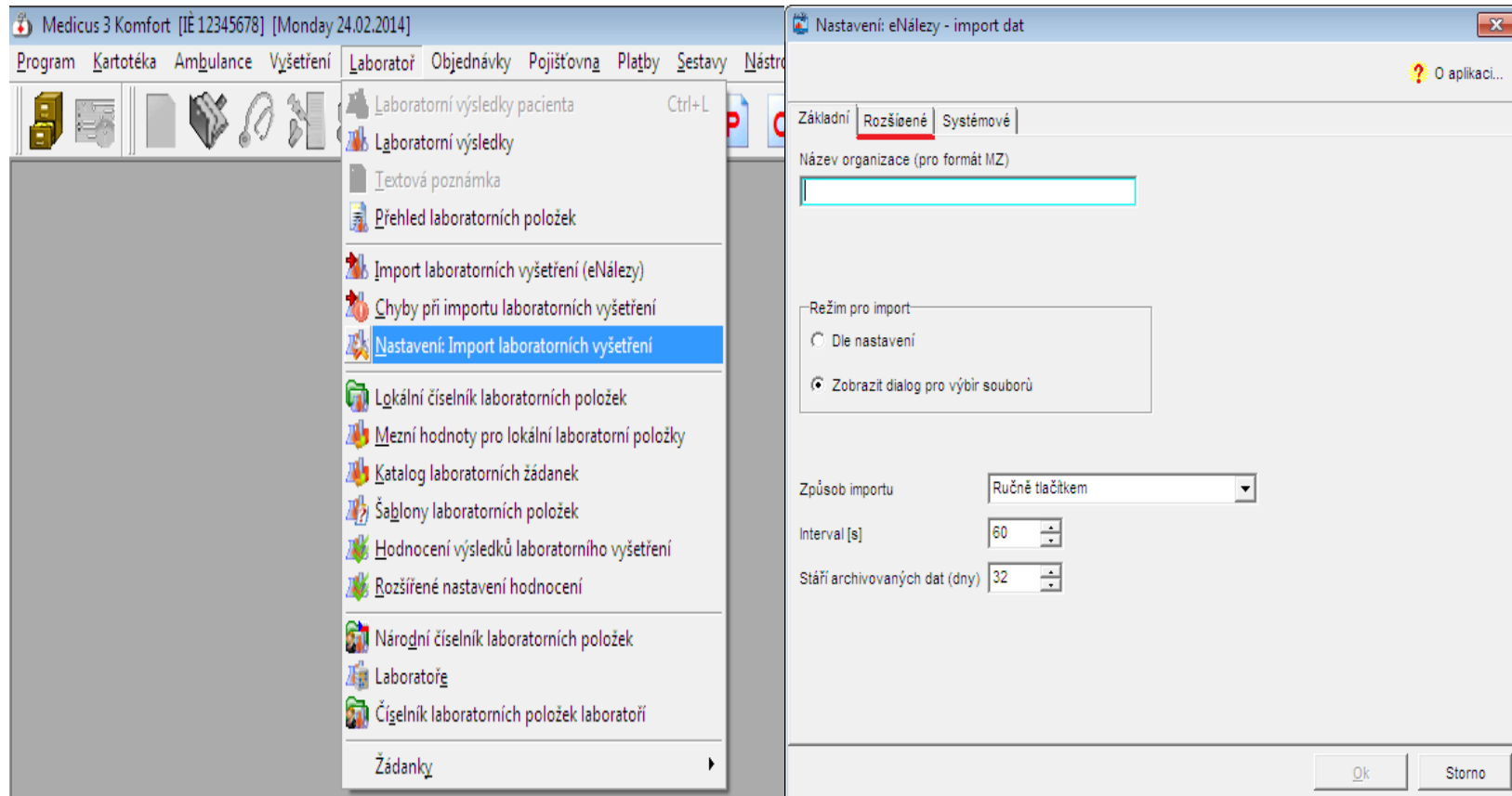

2. Pokud není zaškrtnuto „Archivovat“ ve skupině „Adresář pro archivaci importovaných souborů“ pak tuto položku zaškrtněte a nastavte cestu k adresáři. Adresář může být libovolný, např. C:\lab\archiv.
 3. V programu eZprava v menu *Účet/Nastavení* pak nastavte odpovídající adresáře, viz obrázek.
 - a. „DASTA doručené“ odpovídá „Adresář souborů pro import“ – díky tomuto propojení se Vám zprávy přijaté eZpravou ve formátu DASTA naimportují do programu MEDICUS k příslušnému pacientovi. Pokud chcete importovat pouze vybrané zprávy a automatický import Vám nevyhovuje, pak zaškrtněte „Ukládat do 'DASTA doručené' pouze po kliknutí na tlačítko Import“. Tím se naimportují pouze ty DASTA soubory u kterých kliknete na tlačítko „Importovat“ v prohlížeči DASTA souborů programu eZprava.
 - b. „DASTA archiv“ odpovídá „Adresář pro archivaci importovaných souborů“.
 4. Restartujte program eZprava. Pokud jsou v adresáři „Adresář pro archivaci importovaných souborů“ soubory, pak by se Vám měla automaticky vyplnit kartotéka v eZpravě.
- Dále je vhodné vybrat přednastavený typ nálezu podle odbornosti (nepovinná položka)
 - Zapnout upozornění na příchozí zprávu (nepovinná položka)
 - Automatické spuštění eZpravy při startu Windows (nepovinná položka)

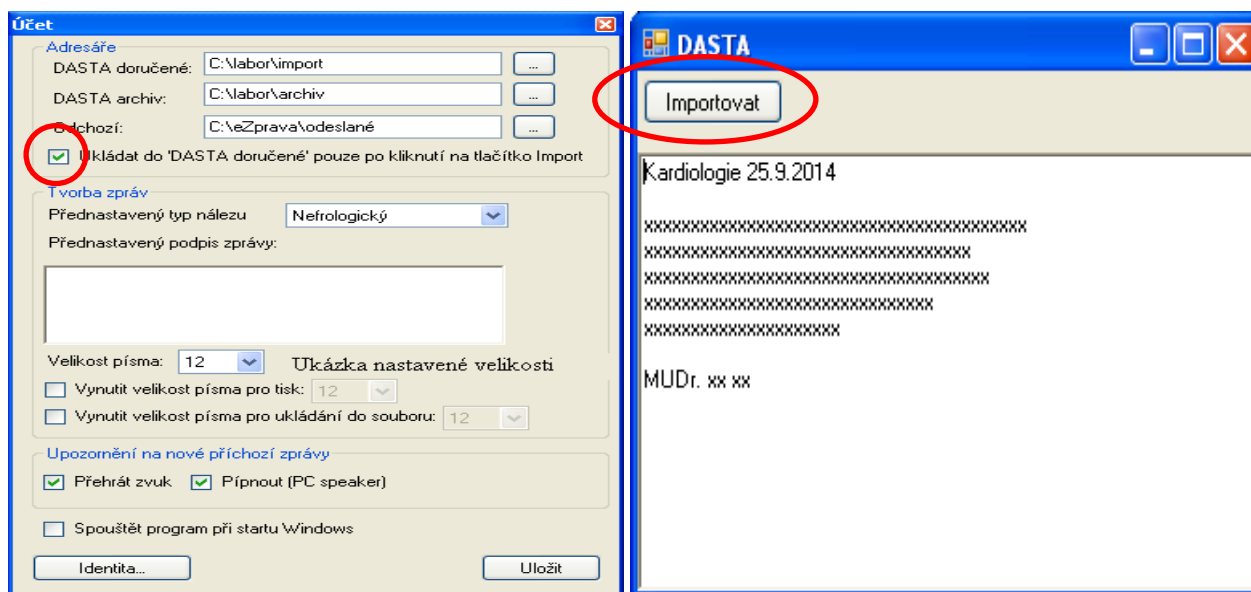

Nastavení: eNález - import dat

Základní Rozšířené Systemové

Nastavení pro formát Implicitní

Formát MZČR

Druh laboratorního vyšetření

Maska souborů pro import Adresář souborů pro import Vždy preferovat název LCLP

C:\lab\import

Adresář pro archivaci importovaných souborů

C:\lab\archiv

archivovat smazat starší archivovaná data
 po importu soubor smazat z disku po importu soubor smazat z diskety

Adresář pro archivaci nenačtených, chybových souborů

archivovat smazat starší archivovaná data
 po importu soubor smazat z disku po importu soubor smazat z diskety

Adresář pro archivaci souborů jiného formátu

C:\Medicus 3\import\MZUINE\

archivovat smazat starší archivovaná data
 po importu soubor smazat z disku po importu soubor smazat z diskety

Adresář popisu chyby

Ok Storno

Účet

Adresáře

DASTA doručené: C:\lab\import ...

DASTA archiv: C:\lab\archiv ...

Údchozí: C:\eZprava\odeslanej ...

Ukládat do 'DASTA doručené' pouze po kliknutí na tlačítko Import

Tvorba zpráv

Přednastavený typ nálezu Praktický lékař

Přednastavený podpis zprávy:

Velikost písma: 12 Ukázka nastavené velikosti

Vynutit velikost písma pro tisk: 12

Vynutit velikost písma pro ukládání do souboru: 12

Upozornění na nové příchozí zprávy

Přehrát zvuk Pípnout (PC speaker)

Spouštět program při startu Windows

Identita... Uložit